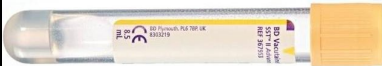




佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院

服務資訊

更新日期：113/11/02

檢驗項目(中文/英文)	B 型肝炎病毒表面抗原定量/HBsAg-Quant	
醫令代碼	140320000001	
檢體類別	血清	
採檢容器及檢體量	 採檢容器：血清分離用促凝劑與分離膠之真空採血試管(黃頭)	檢體量：3mL
採檢注意事項 (包含影響檢驗性能、退件標準)	嚴重溶血、黃疸、脂血的受檢者血清應避免使用	
檢驗操作方法/儀器	Lumipulse G1200/化學發光酵素免疫分析法(CLEIA)	
可送檢時間	星期一至星期日：00:00-24:00	
報告完成時間	7 個工作天	
檢驗效能/干擾	不可使用加熱失活檢體、混合檢體、嚴重溶血或檢體有明顯的微生物污染。	
檢體運送及保存方式	檢體運送：常溫 保存方式： 1.血清/血漿室溫可保存 8 小時。 2.血清/血漿冷藏(2-8°C)可保存 7 天。	
操作組別/ 檢驗諮詢分機	血清免疫組/4316	
健保代碼/給付點數/ 自費價格	因成本高目前維持以自費價格550元收費	
生物參考區間 (包含臨危值通報)	<0.005 IU/ml判讀為Negative; ≥ 0.005 IU/ml判讀為Positive	
臨床意義與用途： 在人類血清或血漿中檢測到HBsAg表示受到B型肝炎病毒的感染。HBsAg是最早的免疫標記物，它一般在臨床症狀開始出現前的數天或數週便可被檢測出來。HBsAg的存在可見於急性或慢性B型肝炎感染的個體，用於診斷確認是否感染HBV及避免透過血液和血液製品而造成B型肝炎病毒的傳播。HBsAg測試也被納入產前照護的一部份，以便實行適當的		

措施避免產婦將HBV感染傳播給新生兒。此外，可藉此監控B型肝炎感染的個體抗病毒治療的療效，監控病情。診斷使用應將測試結果與病患之病史及其他肝炎標記結合作為急性或慢性感染之診斷。

備註: (包含是否自行操作、可否接受委託檢驗、或委外操作)

自行操作、可接受委託檢驗